

MPC

Ointment Mill



MACHINE	ROLLERS	POWER CONSUMPTION Kw	POWER SUPPLY Kw	DIMENSION s LxWxH cm	WEIGHT Kg.
MPC	DIAM. 50X150 MM	0,2	110/230 SINGLE PHASE	40x26x36	25



Mulino per creme

Ideale per un'accurata frantumazione e omogeneizzazione di unguenti, creme, paste, gel e sospensioni, permette la riduzione delle dimensioni delle particelle per un assorbimento ottimale.

Il mescolatore è composto da tre rulli rettificati ceramici in ossido di alluminio (Al₂O₃ 99.7%).

Il grado di frantumazione è determinato dalla distanza tra i rulli.

Il mescolatore può essere agevolmente pulito mediante un detergente non abrasivo seguito da alcool.



Ointment Mill

Ideal for fine trituration and homogenization of ointments, creams, pastes, gels and suspensions, the mill enables the reduction of particle size for an optimal absorption into the body.

The mill features three ceramic rollers made of aluminum oxide (Al₂O₃ 99.7%).

The degree of trituration is determined by the amount of space among the rollers.

The mill can be easily cleaned by using a non-abrasive detergent followed by alcohol.



Molino para cremas

Ideal para una trituración precisa y homogeneización de ungüentos, cremas, pastas, geles y suspensiones, permite la reducción del tamaño de las partículas para la absorción óptima. El mezclador se compone de tres rodillos cerámicos rectificadas en óxido de alúmina (Al_2O_3 99,7%). El grado de trituración se determina por la distancia entre los rodillos. El mezclador se puede limpiar fácilmente con un detergente no abrasivo seguido de alcohol.



Pommadeuse

Idéal pour le broyage et l'homogénéisation d'onguents, crèmes, pâtes, gels et matières en suspension, la pommadeuse MPC permet la réduction des dimensions des particules en vue d'accroître l'absorption du produit.

Le malaxeur se compose de trois rouleaux en céramique d'oxyde d'aluminium (Al_2O_3 99,7%).


Le niveau de broyage dépend de la quantité d'espace entre les rouleaux.

Pour nettoyer le malaxeur, enduisez-le d'abord d'un détergent non abrasif et ensuite d'alcool.



Mühle für cremen

Perfekt für die zerstümmerung und homogenisierung der cremen, salbe, gel bringt zur dimension reduzierung der kleinen teile für eine optimalen absorphion. Der mischer ist aus 3 richtiggestelle rolle zeramisch in alluminiumoxyd (Al_2O_3 99,7%). Das zerstümmerungsgrad ist von der fernung zwischen den rollen determiniert. Der mischer kann leicht geputzt werden durch einengefolgt von alcohol.

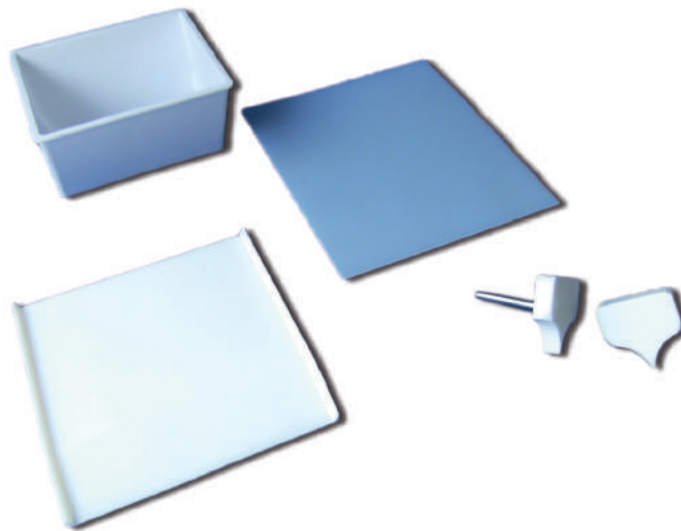

Set accessori incluso
Accessory set included